

jednoducho Mocom

Naša vízia

Už viac ako dvadsaťpäť rokov sú bezpečnosť, spoľahlivosť a inovácie vedúcimi princípmi vo všetkých aspektoch návrhu a výroby v spoločnosti Mocom, svetovom lídrovi v oblasti sterilizácie. Faktory, ktoré nás odlišujú, pokiaľ ide o zručnosti a inovácie, sú svedomitá pozornosť venovaná výberu materiálov, prelomová technológia, dodržiavanie prísnych výrobných a kontrolných protokolov a bohaté skúsenosti našich kvalifikovaných, špecializovaných dizajnérov sterilizačných systémov. Mocom, sterilizácia na prvom mieste.

Mocom S.r.l. reserves the right to modify the products illustrated in the photos without prior notice. 02/2017 MMLSG8171 S00
According to the regulations in force, some products and/or features may have different availability and characteristics in areas outside of the European Union. Please contact your local distributor.

Millseal tepelné zváračky

Vynikajúca hygiena



Sede Legale ed Amministrativa
Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601
www.mocom.com
infomocom@mocom.it



Ochrana a hygiena.


Millseal, tepelné zväračky na zabezpečenie dokonalej ochrany vašich nástrojov.

Zachovanie sterility nástrojov je absolútnou prioritou pre tých, ktorí pracujú v zdravotníctve, kde je prevencia každej možnej krížovej kontaminácie nevyhnutná. Škála zariadení s množstvom funkcií zabezpečuje správnu a dlhodobú sterilitu nástrojov a plnú súlad so štandardmi, pričom zjednodušuje postupy a skracuje časy balenia.



Millseal+ Evo

Jednoduchý a efektívny svojou podstatou, tento automatický tepelný zvärač skracuje časy balenia.

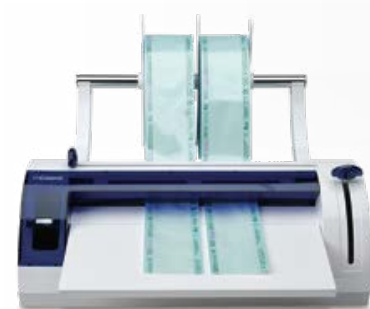

Millseal+ Manual

Tento tepelný zvärač je moderný klasik a poskytuje spoľahlivý výkon v akejkoľvek zubnej chirurgickej zákroku.



Millseal Rolling

Svojím ergonomickým, základným dizajnom tento stroj pristupuje k procesu zvärania novým spôsobom.



Millseal+ Evo, bezpečnosť a efektivita.

Automatický tepelný zvarač, ktorý skracuje časy balenia.

Millseal+ Evo vyniká vďaka svojmu kompaktnému lineárnemu dizajnu, výnimočnej používateľskej prívetivosti a plne automatickej kontrole prípravy. Po nastavení dĺžky a počtu vreciek, ktoré chcete pripraviť, stačí stlačiť príslušné tlačidlo „Program“ na spustenie automatického postupu. Praktická klávesnica umožňuje používateľom ovládať rôzne funkcie, všetky identifikované ľahko pochopiteľnými ikonami.



Šetrite čas

Vďaka automatickému programu na výrobu vreciek, schopnému pripraviť až 20 vreciek za minútu, môže operátor ušetriť drahocenný čas a zasahovať len počas sekundárneho zvárania.



Program pre každú potrebu

Millseal+ Evo umožňuje používateľom nastaviť dva programy s rôznymi dĺžkami a množstvami vreciek. Po výbere programu tepelný zvarač automaticky pripraví vrecká. Alternatívne môže operátor postupovať manuálne a baliť nástroje tradičnejším spôsobom.



Praktický displej

Výber programu je jednoduchý a okamžitý. Počas procesu balenia veľký displej zobrazuje nastavenia (dĺžka a počet vreciek), čo umožňuje rýchlu kontrolu parametrov.




Garantovaná sterilizácia

Tepelné zvaračky Millseal+ sú vybavené elektronickou kontrolou parametrov (čas a teplota) a zabezpečujú 12 mm široký zvarací pás, čo výrazne presahuje zákonné požiadavky. Okrem toho vizuálne-akustické správy poskytujú informácie o efektívnosti zvaračky.

Millseal+ Manuál, základný a spoľahlivý.

Jedinečná jednoduchosť a praktickosť sú k dispozícii aj v manuálnej verzii.

Millseal+ Manuál ponúka ergonomický, funkčný dizajn, čo ho robí nevyhnutným vo všetkých chirurgických zákrokoch. Indikačné svetlá a varovné zvuky umožňujú efektívne monitorovanie správnej funkcie tepelného zvárača. Ako jeho automatický protějšok, aj táto manuálna verzia zabezpečuje šírku zvárania, ktorá v skutočnosti presahuje zákonné požiadavky. Praktickosť a jednoduchosť, poskytujúca všetku bezpečnosť, ktorú potrebujete.

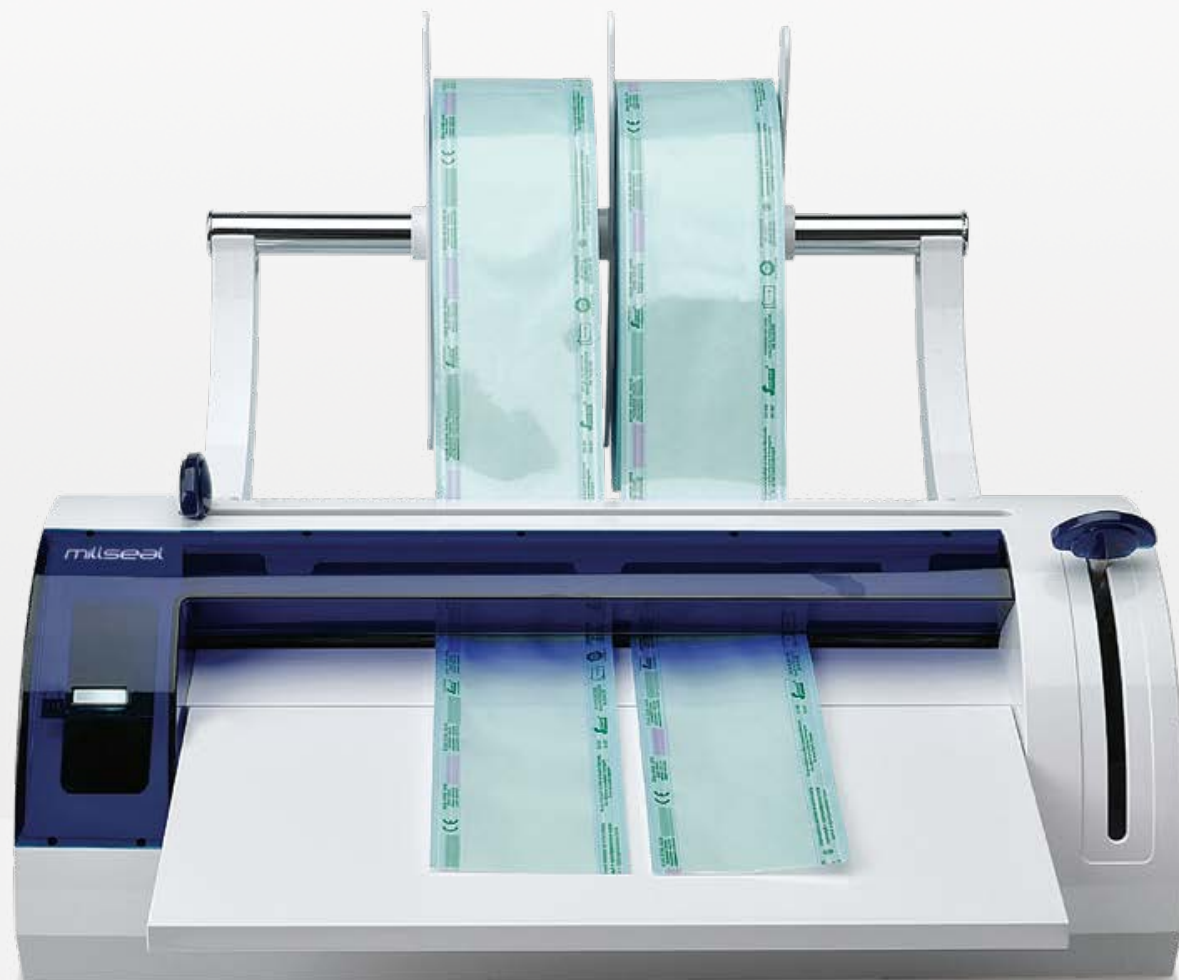

Zameranie na jednoduchosť

Jednoduché kroky zabezpečujú plynulé, spoľahlivé pracovné postupy s vysokými bezpečnostnými normami.




Konštantný, dlhotrvajúci výkon

Automatická regulácia teploty zaisťuje efektívne riadenie ohrevu v tesniacej zóne, aby sa udržala dlhotrvajúca vysoká kvalita výkonu. Tepelné zváračky Millseal+ tiež disponujú zariadením na ochranu pred prehriatím a automatickým systémom úspory energie v pohotovostnom režime.



Ergonomický, praktický dizajn

Tepelné zváračky Millseal+ kombinujú používateľskú prívetivosť s vynikajúcou spoľahlivosťou. Systém pozicionovania udržiava papier na mieste a zabráni navíjaniu rolky po odrezaní a zavretí, čo zabezpečuje lineárny, nepretržitý postup.

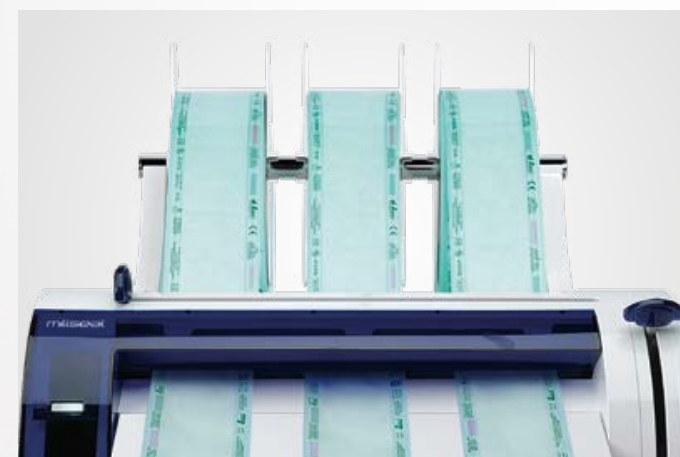

Jednoduchšie riadenie vrieciek

Držiak rolky umožňuje súčasne umiestniť až tri rolky s maximálnou šírkou 300 mm. Ak chcete použiť inú veľkosť, jednoducho vymeníte rolku pomocou príručnej umiestnenej tyče za tepelným zváračom.

Millseal Rolling, technologická sila.

Inovatívne riešenia na medicínske účely.

Rýchle a bezchybné, Millseal Rolling je zvärač typu valca s automatickým podávacím systémom riadeným fotoceluloidom, ktorý ponúka výkon nad rámec očakávaní. Vynikajúca technológia zabezpečuje rýchly, efektívny, automatický postup a dokonalé zväranie aj s najväčšími nástrojmi.



Limity

Tento tepelný zvärač ponúka mimořádný výkon a zároveň umožňuje používateľom balenie nástrojov väčšieho objemu.



Inovačná technológia

S medicínskou kvalitou, Millseal Rolling urýchľuje a optimalizuje zväranie predrezaných vreciek zapečatených na troch stranách. 15 mm široký zvärací pás zaisťuje dlhotrvajúcu sterilnosť zabalených nástrojov. Vďaka regulácii teploty je možné dosiahnuť efektívne riadenie zväracieho procesu, čím sa zabezpečuje konzistentne vysoký výkon v priebehu času.



Automatický pohon a fotocelulárna technológia

Jedinečné vlastnosti tohto tepelného zvärača umožňujú plne automatické vykonanie balíkovacieho postupu. Fotocelulárna technológia umožňuje presné riadenie automatického prechodu vrečka cez valce.



Integrovaná tlačiareň

Millseal Rolling môže byť vybavený integrovanou tlačiarňou, ktorá počas zväracieho procesu automaticky tlačí dátumy balenia a doby trvanlivosti na vrečku. Toto umožňuje používateľom udržiavať sterilnosť zabaleného materiálu pod neustálou kontrolou.

Detaily, ktoré robia rozdiel.

Millseal Rolling disponuje veľkým displejom a celým radom príslušenstva.

Používateľsky prívetivý displej umožňuje používateľom nastavovať a prezeráť prevádzkové parametre intuitívnym a presným spôsobom. Ďalšie príslušenstvo - ako podporná doska, externá jednotka valcov a rezačka - dopĺňa výkon stroja a zvyšuje praktickosť.




Podporná doska

Lahko sanitovateľná doska z nehrdzavejúcej ocele robí zapečaťovanie vreciek ešte jednoduchším. Ergonomický a minimalistický dizajn navyše poskytuje dokonalý vzhľad v akomkoľvek chirurgickom prostredí.



Jednoduchá manipulácia

Pri vreckách s ťažším alebo objemnejším nákladom praktická valcová jednotka uľahčuje prietok, čím zjednodušuje manipuláciu.

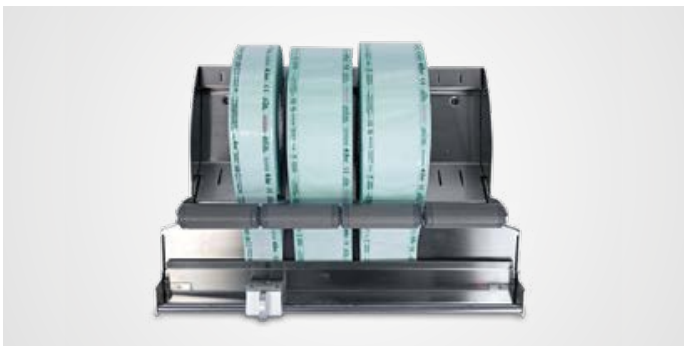

Rezací systém

Millseal Rolling môže byť tiež vybavený praktickým zariadením na rezanie sterilizačných vreciek. Toto užitočné príslušenstvo umožňuje používateľom rezať papierové rolky na požadovanú dĺžku. Môže byť inštalované horizontálne na vrchu alebo vertikálne na stene.



Technické údaje	Millseal+ Evo	Millseal+ Manual
Zdroj napájanie	220/240 V	220/240 V
Frekvencia siete	50/60 Hz	50/60 Hz
Výkon	150 W - 0.45 A	150 W - 0.45 A
Vnútorné rozmery	474 x 374 x 200 mm (LxDxH)	474 x 374 x 200 mm (LxDxH)
Hmotnosť	6.5 kg	5 kg
Typ zvárania	Continuous constant-temperature cycle	Continuous constant-temperature cycle
Hodnotená pracovná teplota vyhrievacieho prvku	180° C	180° C
Výška zväracieho pásu	12 mm	12 mm
Maximálna šírka zväracieho pásu	300 mm	300 mm
Materiály, ktoré možno zvärať.	Paper/plastic film laminate	Paper/plastic film laminate
Maximálny priemer rolky	200 mm	200 mm



Technické údaje	Millseal Rolling
Zdraoj napájania	220/240 V
Frekvencia siete	50/60 Hz
Výkon	600 W
Vnútorné rozmery	512 x 236 x 145 mm (LxDxH)
Váha	10 kg
Typ zvárania	Rotary, continuous-cycle
Hodnotená pracovná teplota vyhrievacieho prvku	Adjustable between 80° C and 190° C
Výška zväracieho pásu	15 mm
Rýchlosť zvárania	10 m/min
Obalový materiál, ktorý možno použiť	• papier / plastový fóliový laminát na sterilizáciu • Tyvek® / fóliový laminát na sterilizáciu • iné lamináty z materiálov kompatibilných s tepelným zváraním.
Integrovaná tlačiareň	• Voliteľné